



Réchauffeur à bas débits 100ml / 37°C à sec avec sécurités

Seul réchauffeur de fluides à sec efficace et sécurisé

Aucune pièce à remplacer

Pas d'entretien spécifique

37°C à sec jusqu'à 100 ml/min

Valve anti retour

Dégazage par la membrane micro poreuse

Double plaque chauffante

Placé le plus près possible du patient afin de réduire la perte de calories, le set est équipé d'une valve anti retour proche de la voie d'abord et sa membrane micro poreuse chasse automatiquement l'air du circuit.

Un régulateur limite les pressions excessives dans le circuit et à la voie d'abord du patient. Le module mère contrôle la température et les alarmes, et informe l'opérateur des incidents et du débit.


Toutes ces sécurités fonctionnent automatiquement sans aucune intervention de l'opérateur.

Le set :



- 1 Valve Anti-retour
- 2 Doubles Plaques chauffantes Chauffage à sec 38°C dès l'entrée du soluté
- 3 Valve de contrôle du débit interdit le passage d'air principalement durant le transport
- 4 Membrane micro poreuse de l'échangeur thermique chassant l'air contenu dans le soluté
- 5 Valve de régulation de pression dans le circuit et la voie d'abord

Buddy Lite

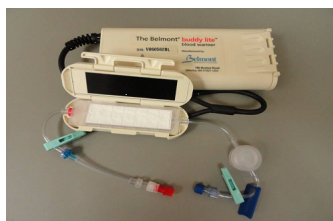

Petit, léger, sans entretien, Réchauffeur bas débit jusqu'à 80ml/min.
Fonctionne sur batterie rechargeable
Set stérile identique au set du BUDDY ref : 905-00010

Buddy Lite AC



Petit, léger, sans entretien. Réchauffe à 38°C, 4.4 litres de solutés.
Batterie & Secteur
Utilisés en tous lieux, zone de combats, en ambulance ou en vol.
Étanche. Purge automatique. Set ref 905-00010



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)